

Van Dinter Den Haag voert het kwaliteitskeurmerk van Bewegingsvisie

Een hoogwaardige, kwalitatieve dienstverlening is waar het keurmerk Bewegingsvisie voor staat. Net als alle leden zijn wij oprecht betrokken bij onze klanten. Daarnaast zijn vakmanschap en liefde voor innovaties belangrijke uitgangspunten van waaruit we werken. Bewegingsvisie levert een breed assortiment eersteklas prothesen, orthesen, elastische kousen, korsetten, bandages en inlays.

Samenwerkingen in de zorgketen

Zorg verlenen doe je niet meer alleen. De vijftien bedrijven van Bewegingsvisie werken nauw samen met zorgverleners die het orthopedisch hulpmiddel integreren in de zorgketen, zoals huisartsen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. Zo zijn we in staat om onze klanten op basis van tal van invalshoeken de meest passende zorg te bieden.

'We zorgen ervoor dat uw baby voldoende bewegingsvrijheid behoudt.'

De nieuwste technologie

De ontwikkelingen binnen de orthopedische branche volgen elkaar in razendsnel tempo op. Bij Bewegingsvisie hebben we verschillende expertisegroepen om ervoor te zorgen dat we steeds de meest innovatieve zorg volgens de nieuwste inzichten kunnen leveren. Deze kennis delen we onderling. U kunt ervan uitgaan dat elk lid van Bewegingsvisie de beschikking heeft tot de nieuwste productie- en analysetechnologie waardoor u voor elke hulpvraag verzekerd bent van een optimaal hulpmiddel.

U kunt bij Van Dinter Den Haag terecht voor:

- orthesen
- prothesen
- inlays
- therapeutische elastische kousen (steunkousen)
- korsetten
- redressiehelmpjes

Vestigingen in o.a.

- Oss
- Den Bosch
- Deurne
- Uden
- Tilburg
- Brunssum
- Breda
- Helmond
- Eindhoven
- Geldrop
- Venray
- Panningen
- Weert
- Venlo
- Heerlen
- Den Haag

www.vandinterdenhaag.nl

Van Dinter Den Haag maakt deel uit van Bewegingsvisie
bewegingsvisie.nl • info@bewegingsvisie.nl • 085 401 95 51

De juiste weg naar de optimale oplossing

1. Naar de specialist

De arts of fysiotherapeut stelt een diagnose en verwijst u door naar Van Dinter Den Haag. U kunt voor een redressiehelm binnen maximaal twee weken terecht bij onze specialisten.

2. Van Dinter Den Haag

We gaan samen met u op zoek naar de meest geschikte redressiehelm, via de volgende stappen:

- We stemmen samen met u de keuze voor de soort redressiehelm af.
- We nemen de maten van het hoofdje van uw kindje op, eventueel met een gipsafdruk.
- Binnen twee weken is de helm gereed en kan deze gepast worden. Tijdens deze afspraak wordt de helm eventueel nog aangepast.
- Pas wanneer de helm optimaal past, leveren we deze definitief af.

3. Evaluatie

Wij vinden het belangrijk om iedere drie à vier weken tijdens een controleafspraak te bekijken of de redressiehelm nog goed voldoet en te bespreken wat uw ervaringen zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.



Redressiehelm



Persoonlijk in orthopedie



Van Dinter Den Haag
orthopedische instrumentmakerij




Van Dinter Den Haag maakt onderdeel uit van Bewegingsvisie. Dit is een groep van vijftien samenwerkende orthopedische instrumentmakers. Een belangrijke doelstelling is om een persoonlijke dienstverlening te combineren met zorg van het hoogste niveau. Dat wordt bereikt door met elkaar samen te werken en zoveel mogelijk praktische en vakinhoudelijke kennis te delen.

Vanaf het moment dat ouders het advies kregen om hun baby niet meer op de buik te laten slapen, in verband met het risico op wiegendood, is het aantal afwijkende schedelvormen bij baby's sterk toegenomen. Een redressiehelm kan dan helpen om deze schedelvormafwijking te corrigeren. In deze folder vertellen we graag meer over de mogelijkheden van de redressiehelm en over onze werkwijze.

Keuze voor de redressiehelm

Wanneer een baby een afwijkende schedelgroei heeft en de schedelnaden zijn niet vroegtijdig dichtgegroeid, kan de redressiehelm uitkomst bieden. Een afwijkende schedelvorm wordt veelal veroorzaakt door een voorkeurshouding van de baby waardoor de kans op scheefgroei van de schedel groter wordt. Over het algemeen wordt in de eerste vijf maanden bekeken of de afwijking (afvlakking) spontaan verbetert, omdat het schedelbot van baby's dan nog erg flexibel is. Met

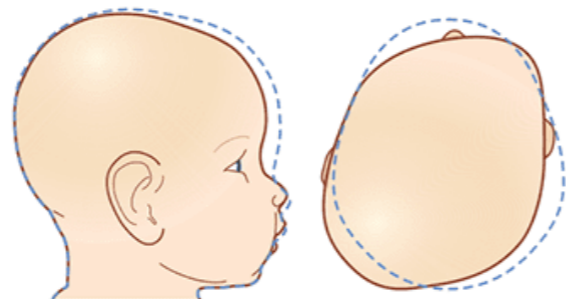

behulp van fysiotherapie en houdingsadviezen worden vaak goede resultaten bereikt. Wanneer de verbetering onvoldoende is, kan vanaf de vijfde maand een redressiehelm worden aangemeten.

Hoe werkt de helm?

De redressiehelm wordt op maat gemaakt en past precies op het hoofdje van uw baby. Het helmpje sluit overal aan en biedt ruimte op de plaats waar de schedel is afgevlakt. Door het bieden van ruimte in de helm wordt de schedelgroei, die van nature plaatsvindt, gestuurd. Er wordt dus geen druk op de schedel uitgevoerd om verbetering van de schedelvorm te bewerkstelligen. Dat is een veel gehoord misverstand! Om een optimale pasvorm van de helm te behouden, zijn er regelmatig controles nodig. Vanwege de groei van de schedel zal de helm aangepast moeten worden. Bij de eerste controle zult u al verschil zien in schedelvorm van uw kind! Rond de eerste verjaardag van uw baby gaan de schedelnaden verbenen en neemt de groeisnelheid van de schedel af. Rond die tijd wordt de helmtherapie daarom afgebouwd en gestopt.

Expertisecentrum voor craniosynostose

In enkele gevallen ontstaat een afwijkende schedelvorm door het vroegtijdig dichtgroeien van de schedelnaden (craniosynostose). Hierdoor ontstaan verschillende schedelvormafwijkingen, afhankelijk van de naad die te vroeg gesloten is (bron: www.craniosynostose.nl). Veelal is dan eerst chirurgisch ingrijpen noodzakelijk. In het UMC Radboud te Nijmegen wordt de operatie uitgevoerd. Wij bieden daarnaast als enige in Nederland de postoperatieve redressiehelm na de endoscopische operatie van craniosynostose. Door een nauw samenwerkingsverband met het UMC Radboud en persoonlijk contact met de chirurgen kunnen wij de beste nazorg bieden bij craniosynostose. Deze helmen kunnen verschillen van de normale redressiehelm. Bij elk kind wordt er gekeken welke helm optimaal is. Hierdoor kan de vorm van de helm per kind verschillen.

Voordelen van het twee schalensysteem

Het twee schalensysteem zorgt voor een prettige en goede pasvorm. Belangrijke voordelen hierbij zijn dat een kinband niet nodig is en de oren volledig vrij zijn. In de nek is een uitsparing gemaakt zodat de baby volledige bewegingsvrijheid heeft. De helm wordt zeer dun gemaakt, slechts 6 mm. Hierdoor heeft het helmpje een minimale invloed op de warmtewisseling van de baby. Daarnaast is deze helm makkelijk op en af te zetten. De redressiehelm wordt op maat gemaakt en past precies op het hoofdje van de baby.

Het helmenteam van ProReva

De redressiehelm wordt al vele jaren door ons gemaakt. Door de jaren heen is er een specialistisch team gevormd, dat dagelijks met redressiehelmen werkt. Jaarlijks worden er enkele honderden helmen geproduceerd op onze eigen productielocaties.

Vergoeding door uw zorgverzekering

De redressiehelm wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt niet voor kinderen met een craniosynostose. De vergoedingen die zorgverzekeraars bieden, zijn uiteenlopend. Op onze website vindt u altijd het meest actuele vergoedingenbeleid van de verschillende verzekeraars rondom de helmtherapie.

In bepaalde financiële situaties (per gemeente verschillend) is vergoeding eventueel mogelijk via bijzondere bijstand. U moet dit dan wel tijdig aanvragen bij uw gemeente.

